

Respireo SOFT Baby

Pour accompagner son premier souffle



Développé en collaboration avec des pneumologues et kinésithérapeutes experts en pédiatrie, Respireo SOFT Baby est un masque dédié aux nourrissons de 3 à 12 kg.


Les nourrissons ont des formes de visages très différentes de ceux des adultes, avec un front plus proéminent, une arête nasale très peu marquée et une structure osseuse fragile en pleine construction. Chacune des caractéristiques du masque a été conçue pour répondre à ces besoins spécifiques.

Le corps du masque, **entièrement composé de silicone souple**, assure une répartition homogène et atténuée des points d'appui sur le visage en se conformant parfaitement au profil de l'enfant. Le harnais a spécialement été pensé pour ne pas être serré. Les cinq points de fixation garantissent la **stabilité et l'étanchéité du masque** avec des réglages souples.

Enfin dans le but de s'adapter aux visages les plus exigeants, **le masque est personnalisable** avec une configuration sans appui frontal.



Respireo **SOFT** Baby

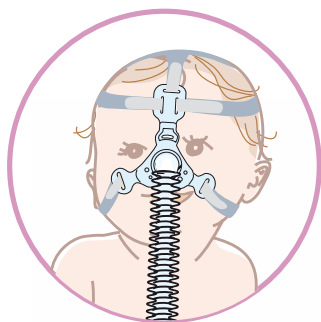

Harnais 5 points

Pour répartir de manière homogène les points d'appui sur le crâne. La stabilité du masque est assurée quels que soient les niveaux de pressions thérapeutiques et les positions du nourrisson.



Fuite diffuse et silencieuse

Bulle souple et confortable

À paroi simple et extra-fine pour garantir l'étanchéité tout en atténuant les points de contact avec la peau.

Port d'entrée

Pour faciliter le traitement à l'hôpital (apport d'oxygène, mesure de signaux...).

Circuit fin et mobile à 360°

Pour une liberté totale de mouvement.



Également disponible en version sans fuite



Références

Respireo SOFT Baby XS	KM225300
Respireo SOFT Baby S	KM225400
Harnais Respireo SOFT Baby XS	KM225500
Harnais Respireo SOFT Baby S	KM225600
Respireo SOFT Baby NV XS	KM227300
Respireo SOFT Baby NV S	KM227400
Ensemble circuit à fuite (x10)	KM228000
Ensemble circuit sans fuite (x10)	KM228100

Masque stérilisable et désinfectable jusqu'à 12 cycles. Entre chaque patient veiller à changer le harnais et le tube (autoclave et désinfection thermique). Pour plus d'informations, merci de contacter votre représentant commercial (protocoles, etc.).



Lire attentivement le manuel d'utilisation.
Dispositif médical de classe IIa **CE**0051.
Fabriqué par Air Liquide Medical Systems Spa. Distribué par Air Liquide Medical Systems SA.